

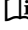



Bedienungsanleitung



Hyper Foam 2

Dekubitustherapie-Matratze

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Einsatz des Systems aufmerksam durch und beachten Sie die **Warnhinweise!**

Produktname	Hyper Foam 2
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Dekubitustherapie-Matratze mit Schaumkern • PU-Bezug (abnehmbar per Reißverschluss) •  Bedienungsanleitung (V02), weitere Sprachen für die Bedienungsanleitung finden Sie hier: manuals.funke-medical.eu
Indikationen / Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • Dekubitusprophylaxe • Dekubitustherapie bis Grad 4 (Seiler/EPUAP) • Schmerztherapie • Für Patienten mit sehr hohem Dekubitusrisiko
Kontraindikationen	Keine bekannt
Zulässiges Patientengewicht min. - max.	20 - 150 kg
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Kern: PU-Schaumstoffe • Bezug: PU-beschichtetes PES-Trägermaterial
Abmessungen	Breite: 90 - 100 cm Länge: 190 - 200 cm
Gewicht des Produkts	12 kg (90/200 cm)
Hilfsmittelnummer (i.S. §139 SGB V)	11.29.05.0005
Medizinprodukt	Klasse 1, MDR 2017/745  
Technische Sicherheit / Schwerentflammbarkeit	Prüfung der Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
Prüfung auf toxikologische Unbedenklichkeit / Biokompatibilität	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Warnhinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der ersten Anwendung muss die Vorbereitung des Systems für den ersten Einsatz durchgeführt werden (siehe "Vorbereiten des Systems für den Einsatz"). • Für verstellbare Liegeflächen geeignet • Oberkante Seitengitter mindestens 22 cm über der unbelasteten Matratzenoberkante
Garantie	5 Jahre auf die funktionellen Eigenschaften des Schaumkerns (Pro-Rata-Garantie)
Wartung	Keine
Reinigungsanleitung (Matratzenbezug)	<p>Der Bezug kann durch eine Wischdesinfektion mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln aus Isopropanol (z.B. Bacillo) oder mit anderen geeigneten DGHM-gelisteten Produkten (z.B. ECOLAB-Reinigungstuch Incidin OxyWipe S XL) desinfiziert werden. Eine chemothermische Reinigung des Bezuges mit handelsüblichen Reinigungsmitteln ist möglich. Der Bezug kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden und ist damit für den Wiedereinsatz bereit.</p> 
Reinigungsanleitung (Kern)	<p>Der Schaumkern ohne Bezug kann mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dies ist durch ein Durchtränken der kontaminierten Stelle oder Besprühen des gesamten Schaumkerns mit einem Desinfektionsmittel (z.B. Bacillo) oder ECOLAB-Schaumspray Incidin OxyFoam S bestehend aus Wasserstoffperoxid) zu erreichen. Danach muss der Schaumkern an der Luft getrocknet werden. Der Schaumkern kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden und ist damit für den Wiedereinsatz bereit.</p>
Vorbereiten des Systems für den Einsatz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Produkt ist zur Anwendung im häuslichen und institutionellen Bereich vorgesehen und geeignet. 2. Entnehmen Sie die Matratze sofort nach Erhalt aus dem Karton. 3. Legen Sie die Matratze in das Bett. 4. Beachten Sie den Aufdruck auf der Matratzenoberseite "THIS SIDE UP".

RKI = Robert-Koch-Institut
 DHGM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
 MPG = Medizinproduktegesetz
 Autoklavieren = Fraktioniertes Vakuumverfahren bei 105 Grad C und 55 Minuten

 **Hersteller im Sinne des MPG und MDR 2017/745**

Funke Medical AG • Ahrenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133
 info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 30.03.2021 09:23